




Flödesväljare MediFlow® Ultra II. Produktbeskrivning.

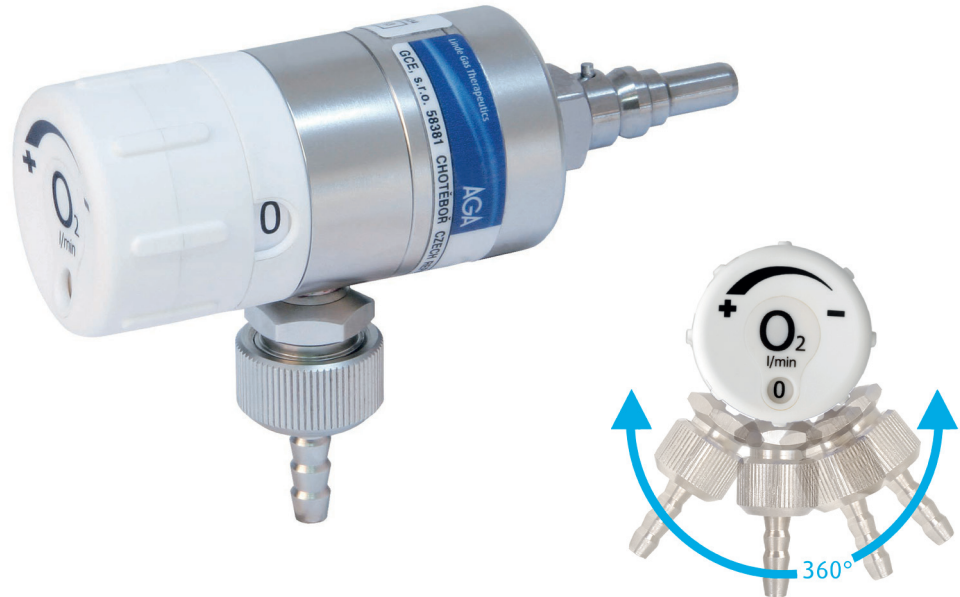

Produktbeskrivning

Flödesväljare från Linde Healthcare för medicinsk oxygen gör det lätt för användaren att fullt ut kontrollera oxygenbehandlingen. De har dessutom en robust och tålig konstruktion.

I varje flödesväljare sitter en inbyggd regulator vilket ger ett stabilt och exakt flöde, oberoende av det inkommande trycket (2800-8000 kPa, 2,8 till 8 bar).

Flödesväljarna har ett greppvänligt inställningsvred och ett tydligt avläsningsfönster som gör det enkelt att ställa in olika flöden av oxygen. De har en förbättrad funktion vid val av flöde som garanterar ett kontinuerligt flöde till patienten, även om inställningsvredet mot all förmodan skulle hamna mellan två flödesinställningar.

Avläsningsfönstret gör det lätt att läsa av flödet både från sidan och framifrån.

Flödesväljarna har som en extra säkerhetsfunktion, vridbar slangnippel (360°) vilket hindrar slangen från att vrida sig.

Flödesväljarna finns i utförande med snabbkoppling, påmonterad klove eller slitsfäste för montering på skena. Flödesväljare för klove och slits levereras med 1 m slang påmonterad och snabbkoppling, rak eller vinklad.

Tre områden av justerbart flöde täcker behovet för de flesta typer av behandling med medicinsk oxygen: 0-2, 0-6 och 0-25 l/min. Flödesväljarnas egenskaper är baserad på standarden EN ISO 10524-4.

Återvinning

Produkten skall återvinnas enligt lokala föreskrifter.

Teknisk data

Gas	Medicinsk oxygen
Tryckområde inlopp	2,8-8 bar
Max utloppstryck utan flöde	2,1 bar
Flödesområden	0-2 l/min (0-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-1-1,5-2) 0-6 l/min (0-0,25-0,5-0,75-1-1,5-2-2,5-3-4-5-6) 0-25 l/min (0-1-2-3-4-5-6-7-9-12-15-25)
Material i hus	Förnicklad mässing
Reglerratt	Polyamid
O-ringar	EPDM
Filter	Sintrad brons och rostfritt stål
Dimensioner	Diameter 37 mm Längd 71 mm (utan inloppstättstycke) Vikt 347 g (321407)
Standarder	Uppfyller medicintekniska direktivet 93/42/EEC. Uppfyller EN 10524-4 Uppfyller Standard EN 1789:2000
Klassificering	Klass IIa

Artikelnummer

Flödesväljare MediFlow Ultra II med snabbkoppling

Art. Nr.	Flöde (liter/min)
321409	0-2
321619	0-6
321407	0-25

Flödesväljare MediFlow Ultra II med klove med 1,0 m monterad slang 6/11 mm

Art. Nr.	Flöde (liter/min)	Snabbkoppling	Infästning
322948	0-6	rak	klove Uni
322650	0-25	rak	klove Uni
322949	0-6	vinklad	klove Uni
322946	0-25	vinklad	klove Uni

Flödesväljare MediFlow Ultra II med slitsfäste med 1,0 m monterad slang 6/11 mm

Art. Nr.	Flöde (liter/min)	Snabbkoppling
321623	0-6	rak
321408	0-25	rak
322947	0-6	vinklad
322945	0-25	vinklad